





C-1 Cervical Color

Boyun anatomisine göre presle kesilmiş sert polietilenden iki parçalı olarak yapılan boyunluğun kenarlarına yumuşak kauçuk geçirildikten sonra yumuşak, kaliteli vinyleksle kaplanmıştır. Otomatik biye kesme makinelerinde kesilen vinyleks son teknoloji özel makine ve aparatlarla dikildiğinden gerekli standardizasyon, kalite ve seri üretim sağlanmıştır. Gerekli yükseklik ayarlarının kolaylıkla yapılması için üç noktada 3 cm'lik welcro, genişlik ayarı ve sabitleme içinde 5 cm. eninde 15 cm uzunluğunda welcro kullanılmıştır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında kullanılır.

C-3 Cervical Color Çenelikli

Cervical Color'a ilaveten çenenin anatomik yapısına uygun çene pedi bulunur. Yükseklik ayarı 2 adet sürgülü metal ayar mekanizması ile yapılmaktadır. Çene desteği ve metal ayar mekanizması ile stabilizesi artırılmıştır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında kullanılır.



C-3A Ekonomik Çenelikli Cervical Color

Boyun anatomisine göre presle kesilmiş sert polietilenden iki parçalı olarak yapılan boyunluğun kenarlarına yumuşak kauçuk geçirildikten sonra yumuşak, kaliteli vinyleksle kaplanmıştır. Otomatik biye kesme makinelerinde kesilen vinyleks son teknoloji özel makine ve aparatlarla dikildiğinden gerekli standardizasyon, kalite ve seri üretim sağlanmıştır. Çenenin anatomik yapısına uygun çene pedi bulunur. Gerekli yükseklik ayarlarının kolaylıkla yapılması için iki noktada 3 cm.lik welcro, genişlik ayarı ve sabitleme içinde 5 cm. eninde 15 cm uzunluğunda welcro kullanılmıştır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında kullanılır.





C-4 Cervical Color Çocuk İçin

Sert polietilenden tek parça olarak yapılan boyunluk 0-12 yaş arası çocuklar için tasarlanmıştır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Çocuklarda cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında kullanılır.

C-4A Cervical Color Çocuk İçin Çenelikli

0-12 yaş çocuklar için tek parça sert polietilenden yapılan boyunlukta çene anatomisine uygun çene bedi bulunmaktadır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Çocuklarda cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında kullanılır



C-5 Cervical Color Sponj (Süngerli)

3 cm. kalınlığında 32 dansite süngerin ince pamuklu dokuma (stokinet) kaplanmasıyla yapılan boyunlukta ekstra destek sağlayan polietilen bulunmaktadır. Süngerden daha dar olarak kesilen polietilen stokinete dikilerek süngerin boyuna daha stabil bir destek vermesi sağlanmıştır. 5 cm'lik welcroyla sabitlemesi yapılan sponjun 5 ayı bulunmaktır.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında kullanılır.

C-5A Cervical Color Sponj Alman Modeli




3 cm. kalınlığında 32 dansite gri süngerden yapılan modelin polietilen desteği süngere sabitlendikten sonra pamuklu dokuma (stokinet) ile kaplanmıştır. 9 cm ve 11 cm. olmak üzere iki farklı yükseklikte üretilen boyunluğun 3 ayrı boyu bulunmaktadır.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında kullanılır.

C-6 Cervical Traksiyon Takımı

Evde cervical omurgaya traksiyon uygulamak için üretilen atel seti; kapıya takılabilen makara tertibatı, traksiyon başlığı, ağırlık torbası, germe çubuğu, ip ve iki adet S halkadan oluşmaktadır. Set evde kapıya takılarak doktorun tavsiye ettiği süre ve ağırlığa göre kolaylıkla uygulanabilir.

Endikasyon: Kaslarda, sinir dokusunda ve boyun bölgesi omurgasında basıncı azaltmakta kullanılır.

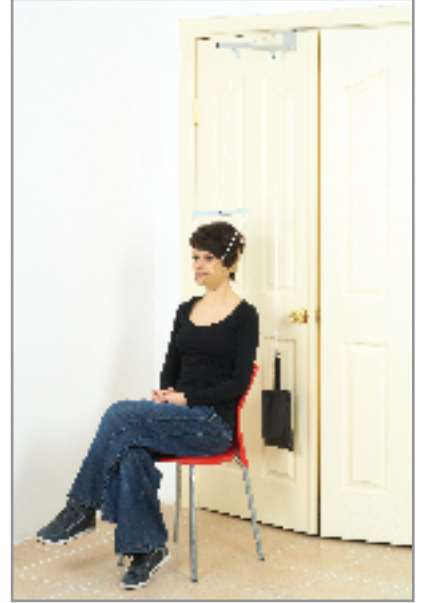

C-7 Cervical Traksiyon Başlığı



Özel süngerli kumaştan, enseye ve çene altına gelecek şekilde iki parçadan yapılan başlık pamuklu fitil ile birleştirilmiştir. İp üzerinde hareket edebilen parçalar başı traksiyona almak için uygun pozisyona getirilerek kullanılır.

C-8 Cervical Rulo Yastık

10 cm. çapında 45 cm. boyunda silindir şeklinde, sürekli elastik ve şeklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilmiştir. Çıkarılabilir, yıkanabilir pamuklu kumaştan kılıf içerisine yerleştirilen yastık çok yönlü kullanılabilir. Boyun yastığı olarak kullanımının yanı sıra bacakları ve diz eklemlerini dinlendirmek için yatarken dizin altına yerleştirilebilir. Cervical bölgedeki dejenerasyonlar sonucunda Cervical boyunlukların kullanılması gerektiği durumlarda yatarken tedaviyi devam ettirmek için doktor tavsiyesiyle kullanılabilir.



C-9 Cervical “U” Yastık

U şekline yakın bir şekilde (bir ucu kısa H) sürekli elastik ve şeklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilmiştir. Pamuklu kumaştan yapılan kılıf içerisine yerleştirilen yastığın boyuna gelen kısmına ayrıca yıkanabilir pamuklu kumaştan ekstra kılıf geçirilmiştir. Cervical bölgedeki dejenerasyonlar sonucunda Cervical boyunlukların kullanılması gerektiği durumlarda yatarken tedaviyi devam ettirmek için doktor tavsiyesiyle kullanılabilir.



C-10 Nelson Color

12 mm’lik ithal İngiliz plastizotundan ten rengi olarak yapılan boyunluğun tüm kenarları yuvarlanmış,ısıyla boyun anatomisine uygun kalıplarla şekil verilmiştir. Özel olarak tasarlanan kalıp sistemiyle boyunluğun çift yönlü olarak kullanılması mümkündür. Uzun boyunlu insanlarda uzun kısım yukarı gelecek şekilde, kısa boyunlu kişilerde uzun kısım aşağıya gelecek şekilde kullanılabilir. Plastizot üzerine açılan 4 adet delikle cildin hava alması sağlanmış, plastizot üzerine yapılan baklava desenleriyle boyunluğun stabilizesi artırılmıştır. Boyunluğun sabitlenmesi ten rengi welcro ile yapılmaktadır. Welcrolar özel yapıştırıcısıyla plastizota monte edildikten sonra uçlarının kalkmasına engel olmak için plastik rivetlerle sabitlenmektedir. Çocuklar için 5 boy,büyükler için 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında, hasta naklinde kullanılır.



C-10B Termojelli Nelson Color



12 mm. ithal İngiliz plastizotundan ten rengi olarak yapılan boyunluğun tüm kenarları yuvarlanmış, ısıyla boyun anatomisine uygun kalıplarla şekil verilmiştir. Boyunluğun açıp kapaması yandan yapılmakta olup enseye gelen kısma 14 cm. 2 cm lik sert welcro takılmıştır. 7cm. x 15 cm. ölçülerindeki cırt cırt yapışabilen süngerli kumaştan yapılmış kese içerisine yerleştirilen termojel ile boyuna soğuk veya sıcak kompres yapılması sağlanmıştır. Bu ürün Boyun rahatsızlığından dolayı Fizik tedavi gören hastaların fizik tedaviye evlerinde de devam edebilmeleri için geliştirilmiştir.

C-10C Soft Nelson Color

12 mm. ithal İngiliz plastizotundan ten rengi olarak yapılan boyunluğun tüm kenarları yuvarlanmış, ısıyla boyun anatomisine uygun kalıplarla şekil verilmiştir. Plastizot kumaşla kaplıdır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında, hasta naklinde kullanılır.



C-10E Ekonomik Nelson Color

12 mm. Plastizottan yapılmış olup üzerinde 4 adet hava deliği bulunmaktadır. Standart kalıplarla 3 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında, hasta naklinde kullanılır.





C-10F İlk Yardım Boyunluğu

12 mm'lik ten rengi, özel olarak üretilmiş Evazottan yapılmıştır. Boyun anatomisine uygun şekilde kalıplarla kesilen Evazot üzerinde 4 adet havalandırma deliği bulunmaktadır. Boyunluk basit hasta naklinde ve ilkyardımda kullanılmak üzere tasarlandığından şekil verilmeden düz olarak üretilmiş, hastanın veya kazazedenin boynunun altından kolaylıkla sürülmesi düşünülmüştür. Boyunluğun açılıp kapatılması welcrolar ile yapılmaktadır. İlk yardım çantalarında kullanım için uygundur.

C-10G Eva Nelson Color

8 mm. mavi renk sert Evazottan yapılan boyunluğun tüm kenarları yuvarlanmış, ısıyla boyun anatomisine uygun kalıplarla şekil verilmiştir. Boyunluğun açılıp kapatılması welcrolar ile yapılmaktadır. Kısa süreli kullanımlar ve ilkyardım için uygundur.



C-10R Rijid Plastizot Boyunluk

25 mm. Düşük dansite plastizotun boyun anatomisine uygun olarak kalıplarla kesilmesi ve pamuklu kumaşla kaplanmasıyla üretilmiştir. Boyunluk üzerine dikilen ekstra kılıf yıkama kolaylığı sağlamaktadır. Boyunluğun kapanması 5 cm'lik welcro ile yapılmaktadır. 4 boy olarak 3 değişik renkte üretilmektedir.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında kullanılır.

C-11 Philadelphia Color



12 mm'lik ithal ten rengi İngiliz plastizotundan iki parçalı olarak yapılan boyunluğun tüm kenarları yuvarlanmış, ısıyla boyun anatomisine uygun kalıplarla şekil verilmiştir. Plastizot üzerine açılan deliklerle cildin hava alması sağlanmış, plastizot üzerine yapılan baklava desenleriyle boyunluğun stabilizesi artırılmıştır. Boyunluğun sabitlenmesi uçlarına ten rengi welcro dikilmiş ten rengi özel vinyleksle yapılmaktadır. ısıyla şekillendirilmiş beyaz forexten çene ve ense desteklerine vinyleks metal rivet ile çakılmıştır. Çocuklar için 5 boy, büyükler için 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Boyun kırıklarında, Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında, acil hasta naklinde kullanılır.

C-11A Philadelphia Color Trakea Açık

Normal philadelphia colordan farklı olarak ön kısmında bulunan boyun desteğinde delik bulunmaktadır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Trakeostomi hastalarında, Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında, acil hasta naklinde kullanılır.



C-11B Philadelphia Color MR Uyumlu



12 mm. ithal ten rengi İngiliz plastizotundan iki parçalı olarak yapılan boyunluğun tüm kenarları yuvarlanmış, ısıyla boyun anatomisine uygun kalıplarla şekil verilmiştir. Ön ve arka destekleri ten rengi olup polietilenden dökülmüştür. Desteklerin plastizota montesi de plastik rivetlerle yapılmaktadır. Plastizot üzerine açılan deliklerle cildin hava alması sağlanmış, plastizot üzerine yapılan baklava desenleriyle boyunluğun stabilizesi artırılmıştır. Boyunluğun sabitlenmesi uçlarına ten rengi welcro dikilmiş özel vinyleks ile yapılmaktadır. Welcrolar özel yapıştırıcısıyla plastizota monte edildikten sonra uçlarının kalkmasına engel olmak için plastik rivetlerle sabitlenmektedir. Boyunluğun imalinde madeni materyalin kullanılmaması MR, Tomografi ve röntgen çekimlerinde vücuttan çıkarılmadan kullanılabilme avantajı sağlamaktadır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Boyun kırıklarında, Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında, acil hasta naklinde kullanılır.



C-11C Philadelphia Color Trakea Açık MR Uyumlu

MR uyumlu philadelphiadan farklı olarak ön kısmında trakeaya gelen kısma delik açılmış plastik destek bulunmaktadır. Trakeanın açık olması nabız kontrolünün ve acil trakea müdahalesinin kolaylıkla yapılmasını sağlar. Boyunluğun imalinde madeni materyalin kullanılmaması MR, Tomografi ve röntgen çekimlerinde vücuttan çıkarılmadan kullanılabilme avantajı sağlamaktadır.

Endikasyon: Trakeostomi olmuş hastalarda, kazalarda, acil hasta naklinde, özellikle MR, tomografi, röntgen çekimlerinde vücuttan çıkarılmasına gerek olmadığından ve de gırtlığa acil müdahale imkanı olduğundan acil hekimliğinde kullanılır.

C-11E Ekonomik Cervical Philadelphia Color

12 mm. plastizottan iki parçalı olarak yapılan boyunluğun tüm kenarları yuvarlanmış, ısıyla boyun anatomisine uygun kalıplarla şekil verilmiştir. Plastizot üzerine açılan deliklerle cildin hava alması sağlanmıştır. 3 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Boyun kırıklarında, Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında, hasta nakillerinde kullanılır.



C-12 Cervical SOMI Brace

Ayarlanabilir çene ve ense destekleri bulunan boyunluğun gövde ve omuzdan welcrolarla sabitlenmesiyle Cervical bölgeyi tam stabil tutması sağlanır. Göğse ve sırtta gelen kısımlar özel süngerli kumaş ile kaplanmıştır.

Endikasyon: Ağır cervical dejenerasyonlarda ve ağır cervical travmalarda, ameliyat sonrasında kullanılır.

C-13 Nelson Color Çenelikli



Nelson Colora ilaveten çeneyi içine alacak şekilde çene desteği vardır. Isıyla şekillendirilerek yapılan çene desteğinin stabilizesini arttırmak için forexten yapılan destek çene kısmına monte edilmiştir.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında, hasta naklinde kullanılır.

C-13A Ekonomik Nelson Color Çenelikli

12 mm. Plastizottan yapılmış olup çeneyi içine alacak şekilde çene desteği vardır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında, hasta naklinde kullanılır.



C-14 Nelson Color Destekli



Nelson Colora ilaveten ön kısımda stabilizasyonu arttırmak için forexten yapılmış destek bulunmaktadır.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında, hasta naklinde kullanılır.



C-15 Extansiyon Ayarlı Boyunluk

12 mm. ithal ten rengi İngiliz plastizotundan tek parça olarak yapılan boyunluğun tüm kenarları yuvarlanmış, ısıyla boyun anatomisine uygun kalıplarla şekil verilmiştir. Boyuna önden istenilen yükseklik ayarını yapabilmek için; Önde plastizot üzerine açılan deliğin üst ve alt taraflarına foreksten kalıplarla şekillendirilmiş destekler yerleştirilmiştir. Desteklere düz ve ters dış açılmış plastik silindirler monte edilmiş. Silindirler arasına takılan çift taraflı dış açılmış metalle de ayar mekanizması tamamlanmıştır. Ayar mekanizması alt ve üst kısmı eşit aralıklarla açıp kapamaktadır. Ayar mekanizmasının 2 cm açıp kapama kapasitesi vardır. Plastizot üzerine açılan deliklerle cildin hava alması sağlanmış, plastizot üzerine yapılan baklava desenleriyle boyunluğun stabilizesi arttırılmıştır. 5 boy olarak üretilen boyunluğun ön kısmında bulunan ayar mekanizması kısa ve uzun boyunlara kolaylıkla uygulanmasını sağlamaktadır.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, cervical ameliyatlar sonrasında, acil hasta naklinde kullanılır.

C-16 Fleksiyon Ayarlı Boyunluk

12 mm'lik ithal ten rengi İngiliz plastizotundan iki parça olarak yapılan boyunluğun tüm kenarları yuvarlanmış, ısıyla boyun anatomisine uygun kalıplarla şekil verilmiştir. Boyuna arkadan istenilen yükseklik ayarını yapabilmek için; Arkada plastizot üzerine açılan deliğin üst ve alt taraflarına foreksten kalıplarla şekillendirilmiş destekler yerleştirilmiştir. Desteklere düz ve ters dış açılmış plastik silindirler monte edilmiş. Silindirler arasına takılan çift taraflı dış açılmış metalle de ayar mekanizması tamamlanmıştır. Ayar mekanizması alt ve üst kısmı eşit aralıklarla açıp kapamaktadır. Ayar mekanizmasının 2 cm. açıp kapama kapasitesi vardır. Plastizot üzerine açılan deliklerle cildin hava alması sağlanmış, plastizot üzerine yapılan baklava desenleriyle boyunluğun stabilizesi arttırılmıştır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, cervical ameliyatlar sonrasında, acil hasta naklinde kullanılır.



C-17 Traksiyon Ayarlı Boyunluk

12 mm. ithal ten rengi İngiliz plastizotundan iki parça olarak yapılan boyunluğun tüm kenarları yuvarlanmış, ısıyla boyun anatomisine uygun kalıplarla şekil verilmiştir. Boyuna önden ve arkadan istenilen yükseklik ayarını yapabilmek için; Önde ve arkada plastizot üzerine açılan deliklerin üst ve alt taraflarına foreksten kalıplarla şekillendirilmiş destekler yerleştirilmiştir. Desteklere düz ve ters dış açılmış plastik silindirler monte edilmiş. Silindirler arasına takılan çift taraflı dış açılmış metalle de ayar mekanizması tamamlanmıştır. Ayar mekanizması alt ve üst kısmı eşit aralıklarla açıp kapamaktadır. Ayar mekanizmasının 2 cm. açıp kapama kapasitesi vardır. Plastizot üzerine açılan deliklerle cildin hava alması sağlanmış, plastizot üzerine yapılan baklava desenleriyle boyunluğun stabilizesi arttırılmıştır. 5 boy olarak üretilen boyunluğun ön ve arka kısmında bulunan ayar mekanizmaları kısa ve uzun boyunlara kolaylıkla uygulanmasını sağlamaktadır.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, cervical ameliyatlar sonrasında, boyunu traksiyona almada, acil hasta naklinde kullanılır.



C-18 Wireframe Boyunluk




İki parçadan oluşan boyunluğun ön kısmı çelik telin plastizot ile kaplanıp üzerine neopren kılıfın geçirilmesiyle yapılmaktadır. Enseye gelen kısma anatomiye uygun şekil verilmiş foreksten destek yapılmış içi de çıkarılıp takılabilir özel süngerli kumaşla kaplanmıştır. Önde bulunan çelik yaya kolaylıkla şekil verilebildiğinden yükseklik ayarlarının hastaya göre yapılması mümkündür. 2 ayrı boyda üretilmektedir.

Endikasyon: Cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, cervical ameliyatlar sonrasında, boynunu traksiyona almada, acil hasta naklinde kullanılır.

T-1 Thorax Traksiyon Kemerini

Korselik kumaşın iç kısmına süngerli kumaşın dikilmesiyle üretilen kemerin sırta gelen kısmına dikilen iki adet kolon ile çektirme yapması sağlanmıştır. Her iki kolonun ucunda bulunan tokalardan çekilerek traksiyon sağlanır. Kemerin kapanması önden welcrobantlarla kolaylıkla yapılmaktadır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Traksiyon gerektiren durumlarda, Fizik tedavide kullanılır.

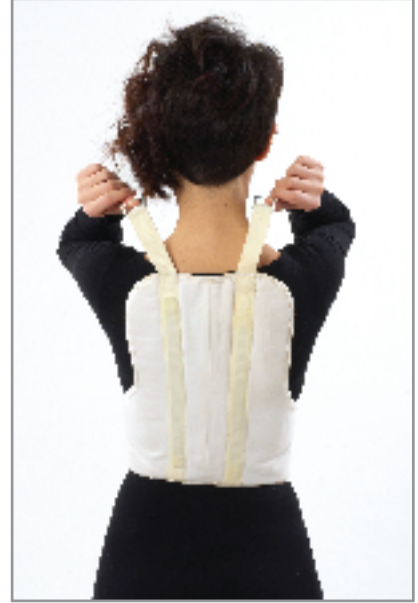

T-2 Pelvic Traksiyon Kemerini

Korselik kumaşın iç kısmına süngerli kumaşın dikilmesiyle üretilen kemerin kapanması önde welcrobantlarla yapılmaktadır. Tek çekişli modelinde arkadan V şeklinde gelen kolon, Çift çekişli modelinde yanlardan W şeklinde gelen çift kolon uçlarına toka dikilerek kullanılmaktadır. 5 boy olarak üretilmektedir.

Endikasyon: Lumbar, lumbosacral ve sacroiliac traksiyonunda, omurlararası basıncı azaltarak hastayı rahatlatmada kullanılır.



T-3 Pelvic Traksiyon Kemerli Çift Çekişli

Her yönden cırt yapışabilen süngerli kumaştan üretilen kemerin kapanması önde welcrobantlarla yapılmaktadır. Çift çekişli modelinde yanlardan W şeklinde gelen çift kolon uçlarına toka dikilerek kullanılmaktadır. 5 boy olarak üretilmektedir.



Endikasyon: Lumbar, lumbosacral ve sacroiliac traksiyonunda, omurlar arası basıncı azaltarak hastayı rahatlatmada kullanılır.

T-4 Cilt Traksiyon Kiti Çocuk İçin

Beyaz renk özel olarak dokunmuş antialerjik 5 cm.lik flasterden yapılan çocuk boyunda atelin kolaylıkla kullanılması için flasterin yapışkan kısmına koruyucu bant geçirilmiştir. 6 cm eninde elastik bandaj kitin içinde bulunmaktadır. Topuğa gelen kısım sünger ve plastik takviyeli olup kuşgözü takılmış deliklerden çektirmede kullanılacak ip geçmektedir.

Endikasyon: Tibia ve fibula kemiği kırıklarında dizaltı traksiyonu sağlamak için kullanılır.



T-5 Cilt Traksiyon Kiti - Büyükler İçin

Çocuk boyundan farklı olarak kullanılan flaster 7,5 cm. eninde,kullanılan bandaj 8 cm. enindedir.



Endikasyon: Tibia ve fibula kemiği kırıklarında dizaltı traksiyonu sağlamak için kullanılır.