

ALP-01 Boyunluk Seti (4 Para)

Boyunluklar 4 deđiřik lide boyun anatomisine uygun olarak ve boynunu sabitleyecek řekilde 8 mm evadan retilmiřtir. Gırtlaađa gelen kısımlar acil mdahaleye imkan verecek řekilde aık olup eneye gelen kısımlara ısı ile řekil verilmiřtir. Boyunluđun n kısmına dayanıklılıđı arttırmak iin ısıyla řekillendirilmiř destek yerleřtirilmiřtir. MR, Tomografi ve rntgen ekimlerine engel olmamak iin madeni materyal kullanılmayan boyunlukların takılıp ıkarılması velcro ile ve ayarlanabilecek řekilde olup boyunlukta havalandırma delikleri bulunmaktadır. 4 adet boyunluđu alabilecek řekilde fermuarlı muhafaza antasına yerleřtirilmiřtir. anta turuncu renk, su geirmeyen ve kolaylıkla yıkanıp, silinebilen materyalden yapılmıřtır. Acil durumlarda ve hasta naklinde geici boyun immobilizasyonu iin kullanılır.



ALP-02 KED Acil Kurtarma Yeleđi

Turuncu renk muřamba brandadan yapılan yelek iine aılan ceplere 22 adet preslenmiř deniz kontrplađının yerleřtirilmesiyle yapılmıřtır. Kaza ve dođal afet sonrasında omurgası zarar grmüş hastayı tamamen saracak řekilde tasarlanmıřtır. Boyun desteđi de yeleđe monte edilebilecek řekilde rnle birlikte bulunmaktadır. Yelek kolaylıkla silinip yıkanabilmektedir.



ALP-03 Omurga Tahtası Byk

Preslenmiř 16 mm. dayanıklı su geirmez deniz kontrplađından yapılan omurga tahtasının boyu 185 cm'dir. Tahtanın kenarlarına 22 adet el girebilecek byklkte delikler aılmıř olup ayrıca bařın geldiđi kısımda halat bađlanabilmesi iin yuvarlak delik bulunmaktadır. Tahta iindeki elik tellerin stne oynar bařlıklı tokalar monteli 4 adet emniyet kemeri takılı olup tahta kolaylıkla yıkanıp silinebilecek řekilde boyanmıřtır. Kaza ve dođal afetler sonrasında hasta naklinde kullanılır.






ALP-04 Omurga Tahtası Küçük

Preslenmiş 16 mm. dayanıklı su geçirmez deniz kontrplağından yapılan pediatrik omurga tahtasının boyu 69 cm dir. Tahtanın kenarlarında 6 adet el girebilecek büyüklükte delikler açılmış olup ayrıca üst kismada bir adet delik açılmıştır. Tahta içindeki çelik tellerin üstüne oynar başlıklı tokalar monteli 2 adet emniyet kemeri takılıdır. Tahta kolaylıkla yıkanıp silinebilecek şekilde boyanmıştır.

ALP-05 Omurga Tahtası Tekerlekli

Preslenmiş 16 mm. dayanıklı su geçirmez deniz kontrplağından yapılan omurga tahtasının boyu 185 cm'dir. Tahtanın kenarlarına 22 adet el girebilecek büyüklükte delikler açılmış olup ayrıca başın geldiği kısımda halat bağlanabilmesi için yuvarlak delik bulunmaktadır. Tahta içindeki çelik tellerin üstüne oynar başlıklı tokalar monteli 4 adet emniyet kemeri takılı olup tahta kolaylıkla yıkanıp silinebilecek şekilde boyanmıştır. 11x43 cm ebadında, üzerinde marka ve ürünün Acil Yardım Ürünü olduğu basılı yumuşak vinylex kafa koyulacak yere yerleştirilmiştir. Omurga Tahtasının düz zeminde tek kişi tarafından taşınmasını sağlamak için 4 adet plastik teker tahtanın altına yerleştirilmiştir. Firmamız tarafından geliştirilen bu ürünümüzün taktitlerini engellemek için Türk Patent Enstitüsüne başvurularak Faydalı Model belgesi alınmıştır.

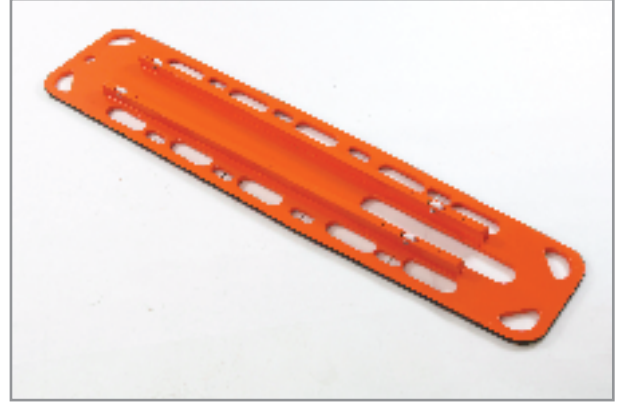

ALP-06 Muşamba Taşıma Sedyesi

220x75 cm ebadında turuncu renk muşamba brandadan çift kat olarak yapılmıştır. Branda üzerine yerleştirilen 5 adet boydan boya kemerle sağlamlığı artırılmış, 6 kişinin tutabileceği şekilde bağlantılar yapılmıştır. Özellikle apartman katlarından hasta naklinde ve sedyelerin kullanılmadığı dar ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir.



ALP-07 Şişme Atel Seti (6 Parçalı)

Set içerisinde bacak ve kolun muhtelif bölgelerine uygulanabilecek şekilde tasarlanmış 6 adet süboplu dayanıklı plastikten yapılmış şişme atel bulunmaktadır. Ateller fermuarlı olduklarından kolaylıkla uygulanabilmektedir. Ateller yıkanabilir, silinebilir çanta içerisindeki ceplere yerleştirilmiştir. Çanta içinde bir adet pompa veya şişirme hortumu bulunmaktadır. Acil durumlarda sabitleme amacıyla kullanılır.



ALP-08 Otopsi Önlüğü

Turuncu renk muşamba brandadan yapılan önlüğü boyuna geçirmek için kolon dikilmiş, bele takılan kolon ve ayarlı plastik tokayla da geniş bir ayar mekanizması sağlanmıştır. Otopsi gibi, gıda maddeleri üretimi gibi kanla ve sıvıyla iç içe bulunan durumlarda koruyucu önlük olarak kullanılır.



EX-01 Ceset Torbası

Siyah renk muşamba brandadan yapılan torbanın kapanması fermuarla yapılmaktadır. Boydan boya 3 ayrı noktadan saran kalın kolonlar ekstra taşıma emniyeti vermektedir. Sağ ve sol taraftan toplam 6 kişinin ceset torbasını taşıyabileceği şekilde el tutma yerleri ayarlanmıştır.



Kullanılan branda içinden geçen ipliklerle güçlendirildiğinden naylon ceset torbalarına göre daha sağlam daha dayanıklıdır.

O-47 Alüminyum Hazır Atel Büyük

Kolaylıkla şekil verilebilen iyi cins alüminyumun her iki yüzeyinin 3 mm ten rengi plastizot ile kaplanmasıyla üretilmiştir. 10,5 cm x 98 cm ölçülerindedir. Tüm vücut bölgelerinin sabitlenmesinde kullanılır. Makasla kesilebilir olduğundan kesilip parmak sabitlemelerinde de kullanılabilir.



O-47B Alüminyum Hazır Atel Küçük

Kolaylıkla şekil verilebilen iyi cins alüminyumun her iki yüzeyinin 3 mm ten rengi plastizot ile kaplanmasıyla üretilmiştir. 10,5 cm x 70 cm ölçülerindedir. Makasla kesilebilir olduğundan kesilip parmak sabitlemelerinde de kullanılabilir.



O-49 Alüminyum Kaburga Ateli



Kaburga Ateli hafif, rahat ve röntgende görünmezdir. Yüzeyi non-alerjik plasterle kaplanmış olup cilde zararsızdır. Atel kırık kaburganın yerinin tam olarak belirlenmesinden sonra kullanılmalıdır. Atel üzerinde yapılacak ayarlamalar sadece incinmemiş tarafta yapılmalıdır. Sadece bükülerek ayarlanmalı, kesilmemelidir. Kaburga ateli 10 günlük tedavi için tek kullanımlıktır. Daha uzun süreli tedavide yenisi kullanılmalıdır.

Endikasyon: Kaburga kırıkları





XX-580

Yaralı Taşıma Ateli Seti

5 mm'lik evadan yapılan ateller vücudun 8 ayrı bölgesine (Boyun, bel, dirsek altı, dirsek üstü, diz altı, diz üstü, el bilek ve tüm bacak) uygulanabilecek şekilde yapılmış, atellerin üzerine boydan boya yapıştırılan 2 cm'lik welcrolar ile tek boy atelin küçük-büyük herkese uyması sağlanmıştır. Atel üzerine yeteri kadar havalandırma deliği açılmış, atel setinin kolay kullanılması ve saklanması için tüm set fermuarlı çanta içerisine yerleştirilmiştir. MR, Tomografi ve röntgen çekimlerine engel olmamak için atel üzerinde madeni materyal bulunmamaktadır. Kazalarda ve doğal afetlerde hasar gören bölgeyi sabitlemek için kullanılır.

Y-51 Üçgen Sargı Bandajı (Triangular Bandaj)

Dayanıklı beyaz renk pamuklu kumaştan üçgen şeklinde yapılan bandajın ölçüleri 93cm x 93cm x 133 cm dir. Bandajın üç kenarı da içe kıvrılıp dikilerek dayanıklılığı arttırılmıştır.

İlk yardım çantalarında ve tüm ilkyardım olaylarında kullanılmaktadır. Kullanım alanı çok geniştir.

