

## K-1 Wonrosen Cihazı



Bel ve Uyluk bantları metalden yapılan cihazın bel ve bacaklardaki ayar mekanizması polietilen kemerler üzerine dikilmiş welcrolar ile yapılmıştır. Polietilenin kenarları yumuşak vinyleks dikilerek kaplanmıştır. Çocuk bezinin üzerine uygulanabilen atelin temizliği kolaydır.

**Endikasyon:** Kalça çıkığında doktor tavsiyesiyle kullanılır.

## K-2 Dennis Broun (Ponsetti) Cihazı - Botlu


Botlu modelinde cihaza monte edilmiş çektirmeli, burnu açık, bağcıklı bot kullanılmaktadır. Ön kısmı tamamen açılabilen botla çocuğun ayağının ayakkabıya tam olarak oturması gözlenebilmekte, çektirme bantta bağcıktan önce takılarak ayağın ayakkabıdan çıkması önlenmektedir. Cihaz metalden yapılmış olup iki ayrı raylı parçadan oluşmaktadır. Parçaların uçlarında iç ve dış rotasyonu sağlayacak dişli sistem bulunmaktadır. Vidalı sistem ile uzunluk ayarı yapılabilmektedir. Ayakkabının topuk kısmına vida ve çivilerle takılan dişli mekanizma ayakkabının cihaza istenilen açıda takılmasını sağlamaktadır. Cihazın kısa ve uzun iki boyu mevcuttur. Botları 14-25 numaraları arasında üretilmektedir.

**Endikasyon:** Kalça çıkığında doktor tavsiyesiyle kullanılır.



## K-2A Dennis Broun (Ponsetti) Cihazı - Botsuz

Cihaz metalden yapılmış olup iki ayrı parçadan oluşmaktadır. Parçaların uçlarında iç ve dış rotasyonu sağlayacak dişli sistem bulunmaktadır. Vidalı sistem ile uzunluk ayarı yapılabilmektedir. Ayakkabının topuk kısmına vida ve çivilerle takılan dişli mekanizma ayakkabının cihaza istenilen açıda takılmasını sağlamaktadır. Cihazın kısa ve uzun iki boyu mevcuttur.

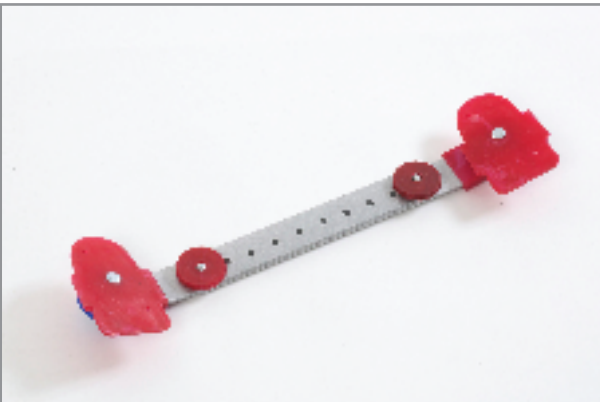

**Endikasyon:** Kalça çıkığında doktor tavsiyesiyle kullanılır.



### K-3 Pavlik Bandajı

Omuza ve bele gelen kısımlar kolondan yapılmış olup iç kısımları yumuşak materyal ile kaplıdır. Ayakların gireceği yerlerdeki kolonlara welcro dikilmiş olup welcroyla ayar mekanizması sağlanmaktadır. Omuzdan ve ayaktan bele gelen kolonların ayarı ısırgan tokalarla kolaylıkla yapılmaktadır. 5 boy olarak üretilmektedir.

**Endikasyon:** Kalça çıkığında doktor tavsiyesiyle kullanılır.

### K-3A Pavlik Bandajı Welcrolu

Omuza ve bele gelen kısımlar cırt yapışabilir süngerli kumaştan yapılmış olup yumuşaktır. Omuzdan ve ayaktan bele gelen süngerli kumaşın ayarlanması welcroyla kolaylıkla yapılmaktadır. 5 boy olarak üretilmektedir.

**Endikasyon:** Kalça çıkığında doktor tavsiyesiyle kullanılır



### K-4 Abdüksiyon Korse

Polietilen malzemeden yapılan korsenin kenarlarına yumuşak fitil geçirilip vinyleksle kaplanmıştır. Belden ve omuzdan sabitlemede ayarlı welcrolu kolonlar kullanılmıştır. Yıkatabilen ve silinebilen korse 5 boy olarak üretilmektedir.

**Endikasyon:** Kalça çıkığında doktor tavsiyesiyle kullanılır.



### K-5 Frejka Ateli - Polietilen

Polietilenin içte sünger ve yumuşak su geçirmez naylonla kaplanmasıyla yapılan korsenin çocuğun her iki bacağına abdüksiyona getirebileceği kadar perianal bölgede uzunluğu olup, perianal bölgeden sonra yay şeklinde bir kavis olarak karşılıklı gelen iki uç bacağın üzerinde birleştirilir. Havalandırma delikleri bulunan korsenin kenarları yumuşak sünger ile takviye edilip vinyleks ile kaplanmıştır. 5 boy olarak üretilmektedir.

**Endikasyon:** Kalça çıkığında doktor tavsiyesiyle kullanılır



### K-5A Frejka Ateli - Muşamba

Su geçirmez kumaştan üretilen korsenin içerisine çelik balenler ve alüminyum balenler koyulup sünger ile desteklenmiştir. Isırgan tokalar ve kolonlarla kolaylıkla ayarlanabilir. Uyluğa gelen kısımlara ekstra sünger koyulmuştur. 5 boy olarak üretilmektedir.

**Endikasyon:** Kalça çıkığında doktor tavsiyesiyle kullanılır.



### K-7 Abdüksiyon Cihazı

Önde ve arkada 15 mm'lik genişliğinde nikelajlı iki parçalı metalden yapılan cihazın ön ve arka parçalarına ayarı sağlamak için yeteri kadar delik açılmış olup açılan deliklere çekilen kılavuzla vidayla parçaları birbirine tespit etme imkânı sağlanmıştır. Bel kısmına gelen plastiğin içi 3 mm. Plastazotla kaplanmıştır. Baldır kısmına gelen plastiklerin kenarına kauçuk fitil koyulup plastiğin kenarları vinyleks ile çepeçevre dikilmiştir. Bele ve baldıra gelen kısımların ayarı welcro ile yapılmaktadır. 5 boy olarak imal edilmektedir.

#### Kullanıldığı yerler ve kullanılışı:

Kalça çıkığında doktor tavsiyesiyle kullanılır. Kullanımı uzman bir eleman tarafından aileye gösterilir.



### X-28 Abdüksiyon Şort

12 mm. ithal İngiliz plastizotundan ten rengi olarak yapılan korsenin tüm kenarları yuvarlanmış, ısıyla kalça anatomisine uygun kalıplarla şekil verilmiştir. Plastizot üzerine açılan deliklerle cildin hava alması sağlanmış, plastizot üzerine yapılan baklava desenleriyle korsenin stabilizesi artırılmıştır. Korsenin sabitlenmesi belde 5 cm.lik ten rengi welcro ile, uylukta ise iki taraflı gelen 2 cm'lik welcro ile yapılmaktadır. 5 boy olarak üretilmektedir.

**Endikasyon:** Kalça çıkığında doktor tavsiyesiyle kullanılır